


Il futuro della tecnologia per la pelle

REVIDERM

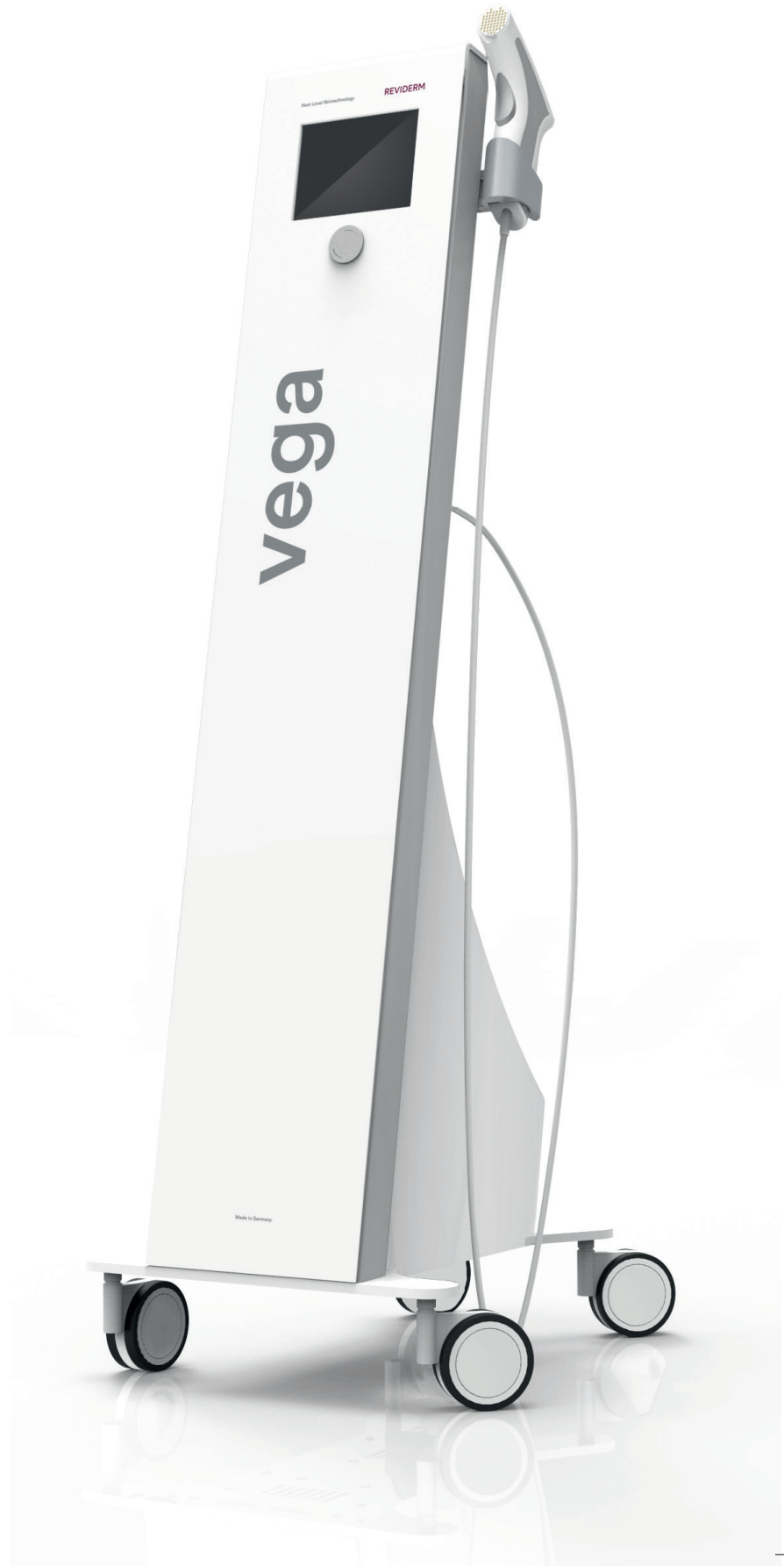

vega

Il futuro della tecnologia
a radiofrequenza.

Vega

Il futuro della tecnologia a radiofrequenza.

I trattamenti con onde a radiofrequenza (correnti elettriche alternate) trovano applicazione da lungo tempo nella medicina estetica e nell'estetica avanzata. Per mezzo di speciali elettrodi, le correnti alternate penetra-no in profondità nella pelle con una determinata frequenza, generando calore e contrastando così i processi di invecchiamento della pelle.

Più volume, elasticità e tonicità...

grazie ad un riscaldamento mirato dello strato cutaneo tra il derma e l'ipoderma (Dermal Hypodermal Junction - DHJ), finora poco considerato. Il trattamento non invasivo con correnti elettriche a radiofrequenza penetra in profondità e stimola i processi rigenerativi della pelle. Le più recenti scoperte scientifiche attestano che nella DHJ hanno luogo quei processi che sono responsabili della perdita di volume ed elasticità tipici dell'età avanzata. Una modulazione mirata di questo strato cutaneo con le onde a radiofrequenza contrasta efficacemente il processo di invecchiamento e contribuisce alla rigenerazione e al ringiovanimento della pelle.

Con REVIDERM Vega agisci efficacemente contro:


- ① Sopracciglia cadenti
- ② Rughe a marionetta
- ③ Doppio mento
- ④ Rughe orbicolari
- ⑤ Guance infossate
- ⑥ Piega nasolabiale eminente
- ⑦ Profilo del mento non definito

Ideale per:


Pelle che necessita di rigenerazione

Segni moderati e avanzati di invecchiamento della pelle

Perdita di tono ed elasticità

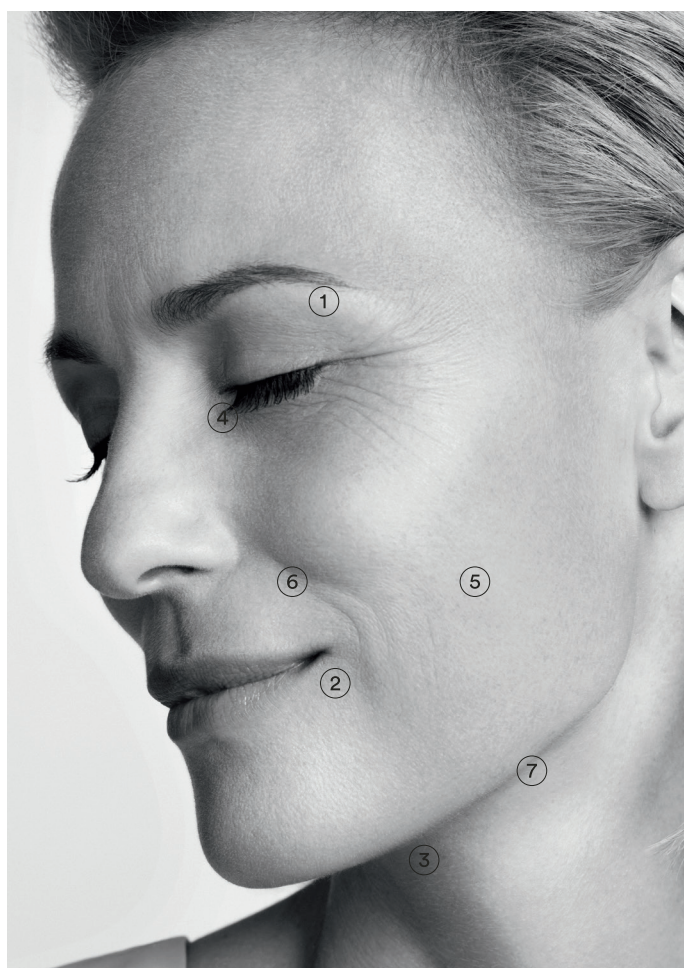


Tutte le caratteristiche in un colpo d'occhio

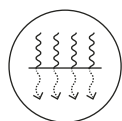

Riscaldamento non invasivo



Skin-Measuring-System

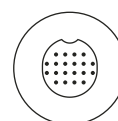

Testine ad elettrodi bipolari

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Tecnologia a radiofrequenza brevettata	Efficace e delicato sulla pelle: aumento visibile del volume del tessuto cutaneo, stimolazione della sintesi di Collagene per un effetto lifting promosso da una tecnologia sicura e all'avanguardia	<ul style="list-style-type: none"> • Approfitta della tecnologia intelligente, brevettata e comprovata e acquisisci nuove clienti grazie agli effetti duraturi del trattamento • Protegge il tuo investimento e ti assicura un vantaggio competitivo
Riscaldamento mirato e non invasivo	Correnti elettriche alternate a radiofrequenza con un calore fino a 43°C per un trattamento non doloroso e delicato per la pelle	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto a tutti i tipi di pelle e delicato per la pelle, senza tempi di fermo macchina dopo il trattamento • Da proporre tutto l'anno. Gli innumerevoli trattamenti possibili ammortizzano rapidamente i costi per l'apparecchiatura e rendono l'investimento particolarmente conveniente
Skin-Measuring-System	La regolazione energetica automatizzata assicura il riscaldamento mirato del tessuto per mezzo di una temperatura personalizzabile	<ul style="list-style-type: none"> • Permette di lavorare in modo sicuro e controllato sulle vostre clienti • Assicura la massima soddisfazione del cliente, in quanto non si possono verificare effetti indesiderati o regolazioni errate
Elettrodi bipolari low/medium/high	Fanno penetrare l'energia in modo mirato e ottimale nella profondità della pelle	<ul style="list-style-type: none"> • Grazie all'effetto locale e mirato, è possibile trattare tutte le aree cutanee delle vostre clienti in modo semplice ed efficace • Garantisce risultati ottimali
Easy-Change-Magnet-System	Facilita la corretta sostituzione degli elettrodi	<ul style="list-style-type: none"> • Lasciate affascinare dall'utilizzo flessibile dell'apparecchiatura e scopri come è rapido e semplice sostituire le calotte degli elettrodi durante il trattamento • Assicura alti livelli di igiene, ti fa guadagnare tempo e garantisce trattamenti dai risultati straordinari
Testine monouso con svalutazione automatica	Garanzia di livelli ottimali di igiene, che trasmette sia a te che alla tua cliente una sensazione di sicurezza e che risponde agli standard più elevati	<ul style="list-style-type: none"> • Una cliente soddisfatta, anche grazie agli elevati standard di igiene, tornerà nuovamente e consiglierà il tuo centro estetico
Programmi pre-impostati	Semplice, rapida e intuitiva scelta dei 4 programmi Anti-Age per un utilizzo facile	<ul style="list-style-type: none"> • Ti dà la sicurezza di aver impostato ogni volta i parametri di trattamento ideali • Questo conduce ad una maggiore soddisfazione del cliente, che tornerà volentieri
Design ergonomico	Grazie al suo peso ridotto (ca. 230 g) e al suo design ergonomico, il manopolo permette di lavorare in modo comodo e non stancante	<ul style="list-style-type: none"> • Anche in seguito a trattamenti consecutivi non appariranno segni di affaticamento. Ciò ti permette di concentrare la tua attenzione sulla qualità del trattamento • Inoltre puoi trattare un numero elevato di clienti, aumentando il tuo fatturato



Modo d'azione

Concetto Anti-Aging innovativo.

DHJ – il nuovo livello d'azione

Diversamente dai comuni trattamenti a radiofrequenza, il metodo non invasivo Vega mira a raggiungere un nuovo obiettivo: gli adipociti dermali nello strato cutaneo tra derma e ipoderma – denominato Dermal Hypodermal Junction (DHJ). Questo strato si trova attualmente al centro dell'attenzione della ricerca dermocosmetica ed estetica, poichè il DHJ ha un influsso determinante sul volume della pelle, la sua elasticità, tonicità e struttura.

Con il trattamento a radiofrequenza Vega speciali elettrodi fanno penetrare nella pelle correnti elettriche alternate, che generano un calore fino a 43° nello strato DHJ. La temperatura moderata è sufficiente, in quanto gli adipociti dermali reagiscono più sensibilmente al calore rispetto agli adipociti nella subcute. Vega concentra l'energia a radiofrequenza con grande precisione nello strato cutaneo tra il derma e l'ipoderma, esprimendo quindi la sua efficacia esattamente nello strato obiettivo. In questo modo viene attivato un efficace processo rigenerativo e viene stimolata la sintesi di Collagene, senza alcun dolore e rischio di ustioni.

Il risultato:


- Stimolazione della conversione (trasformazione) degli adipociti dermali
- Impulso alla produzione di Collagene
- Miglioramento delle caratteristiche meccaniche della pelle

”
Il miracolo del ringiovanimento con radiofrequenza: già dopo alcuni trattamenti è chiaramente visibile un miglioramento della tonicità della pelle e un efficace lifting dei contorni viso.

“

Esperta di dermocosmesi

Concentra l'energia in un nuovo livello cutaneo

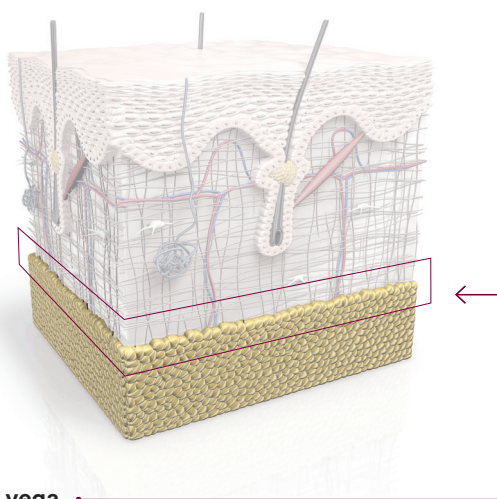

vega


- delicato per la pelle
- contrasta la diminuzione del Collagene
- 40° fino a 43°
- non invasivo

Innovativo

Vega concentra l'energia nel tessuto adiposo sottocutaneo (dWAT), che si trova nello strato cutaneo tra derma e ipoderma (DHJ).

Efficace

Vega raggiunge una distribuzione del calore omogenea e la perfetta profondità di penetrazione attraverso elettrodi bipolari dalla misura ottimale.

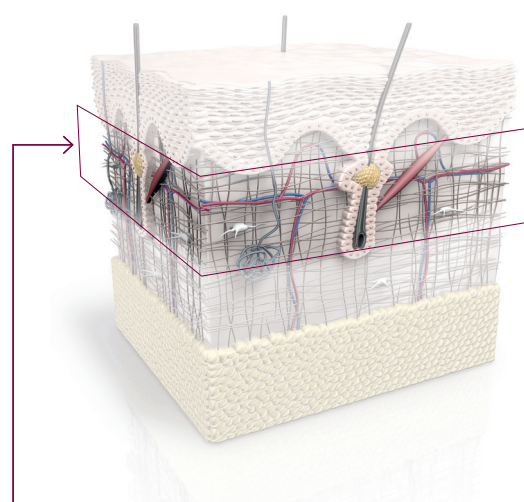



Radiofrequenza tradizionale

- Diminuzione del Collagene
- 55° fino a 65°

Una panoramica del funzionamento


Testine con elettrodi diversificate

Le diverse testine hanno elettrodi particolari (E 1-2) con distanzamenti diversi tra loro. In questo modo le correnti elettriche alternate vengono fatte penetrare con una certa frequenza nella pelle, per generare calore e contrastare i processi di invecchiamento della pelle.

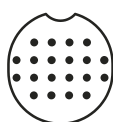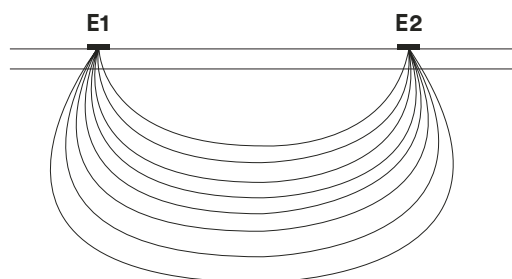


Testina high 1

Pelle spessa:
guance, mandibola superiore & inferiore, mento

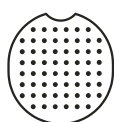


Testina medium 2

Pelle normale:
zona occhi, fronte, guance, mandibola, aree del viso spigolose

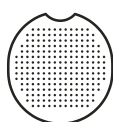

Testina low 3

Pelle sottile:
zona della fronte & collo, zona occhi

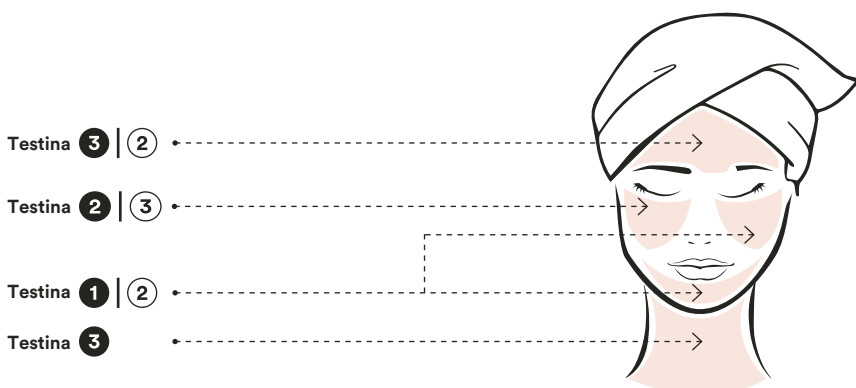

Testina 3 | 2

Testina 2 | 3

Testina 1 | 2

Testina 3

● consigliato

○ opzionale (a seconda della sensibilità delle clienti)

Una panoramica dei vantaggi del manipolo:

- **Semplice utilizzo**
grazie al Easy-Change-Magnet-System
- **Lavoro senza affaticamento**
grazie al leggero manipolo con design ergonomico
- **Personalizzabile**
grazie a testine intercambiabili a seconda del tipo di pelle da trattare
- **Sicuro**
vega riconosce lo spessore della pelle grazie a particolari misurazioni di impedenza


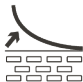











REVIDERM

Trattamento Radiofrequenza - Base

Trattamento base con Vega, per tutte le tipologie di pelle .

Per un'ottimizzazione individuale di una pelle sana. Agisce su pelle che necessita di rigenerazione, segni moderati e avanzati di invecchiamento della pelle, così come perdita di tono ed elasticità. Vega concentra l'energia a radiofrequenza in modo mirato, attivando un processo di rigenerazione e di stimolazione della sintesi di Collagene.

Applicare il detergente adatto alla tipologia di pelle e condizione. Rimuovere eventuale trucco occhi con apposito prodotto.		Detersione
Applicare <i>Enzyme Peeling Liquid</i> sul viso e collo con un pad di cotone asciutto. Seguire poi applicando, con un pennello a ventaglio, <i>Enzyme Peeling Paste</i> realizzando uno strato sottile sulla pelle. Lasciare asciugare (per capire se il prodotto è asciutto toccare la fronte con un polpastrello). Rimuovere il tutto a secco utilizzando i <i>Pagasling Swabs</i> applicando una certa pressione sulla pelle. Infine eliminare l'eccesso con una spugna imbibita con acqua fresca.		Fase Pre Peel (Peeling enzimatico)
Versare il contenuto di una formula monouso all'interno di una ciotola e applicare circa la metà della formula utilizzando un pennello con setole corte. Massaggiare poi delicatamente fino a complete assorbimento.		Formula
Applicare un generoso quantitativo gel in modo uniforme sulla zona da trattare utilizzando un pennello a ventaglio.		Gel radiofrequenza
La durata della radiofrequenza è di circa 20 minuti, seguendo i parametri impostati in modo individuale. Per la tecnica di lavoro vedi il capitolo "Tecnologia – radiofrequenza".		Radiofrequenza
Rimuovere il gel che rimane sulla pelle con abbondante acqua.		Detersione
Applicare la formula rimanente con un pennello a setole corte. Picchiettare poi delicatamente sulla pelle fino ad assorbimento.		Formula
Applicare la maschera in base alla tipologia e condizione della pelle con un pennello a ventaglio. Lasciare in posa dai 15 ai 20 minuti. Rimuovere poi ogni residuo.		Maschera
Applicare il tonico a seconda della tipologia e condizione della pelle utilizzando un dischetto di cotone.		Stabilizzazione
Applicare la crema secondo la tipologia e obiettivo del trattamento e massaggiare delicatamente sulla pelle. Se necessario applicare inoltre una leggera protezione.		Tocco finale
		Trucco

Non combinare con le seguenti tecnologie

Non combinare con microdermoabrasione all'interno dello stesso trattamento.

Possibili combinazioni con ulteriori tecnologie

- ✓ Ultrasuoni
- ✓ Micro-Needling

vega – una garanzia contro l'avanzare del tempo.

”

Dopo il trattamento Anti-Age a radiofrequenza sono visibili risultati duraturi e sostenibili! I trattamenti agiscono in profondità nella pelle, la tonificano e operano un lifting dei contorni del viso.

“

Distribuito in Italia da:

Casa Wellness SNC di Tino
Chinaglia & C.
Via XX Settembre, 90
45021, Badia Polesine (RO)
Tel. 0425 597128
Cell. 389 6423968
Mail. info@casawellness.eu

www.reviderm.it